

Sabouraud dextrosa 4% con inhibidores placa 5 cm


638184 Caja con 10 unidades de placas con medio de cultivo listo para su uso.

Medio de referencia para el cultivo y mantenimiento de hongos y levaduras tanto en muestras clínicas como en el control, investigación y enumeración de hongos y levaduras patógenos y no patógenos, en especial dermatofitos, Recomendado por Janke (1961).

Georg. *et al.* adiciono cicloheximida, penicilina y estreptomycin para producir inhibición de las bacterias acompañantes no patógenas. Hoy en día se logra selectividad mediante la adición de cloranfenicol.

Se utiliza para el diagnóstico de muestras clínicas como uñas, piel, esputo, exudados y lesiones abiertas.

Placas desechables de Ø 5 cm aproximado.

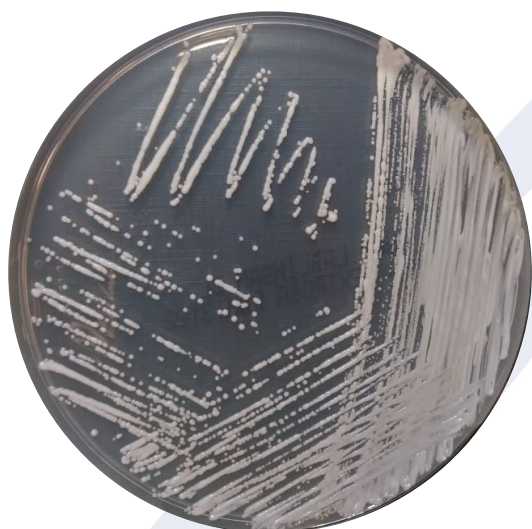

Composición (g / L):

Peptona	10,0
Dextrosa	40,0
Agar bacteriológico	15,0

Inhibidor (g / L):

Cloranfenicol	0,4
Penicilina G	0,012
Estreptomycin	0,04

pH: 5,6 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 12°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar. Durante el transporte (72 hrs), conservar fresco de 5 a 25 °C.

Control de calidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014. Resultados esperados hasta 7 días de incubación entre 25 a 30°C.

Funcionalidad cualitativa

Cepas Control	ATCC	Desarrollo	% de recuperación
<i>C. albicans</i>	10231	Muy bueno	> 75 %
<i>A. niger</i>	16404	Muy bueno	> 70 %
<i>Penicillium spp</i>		Bueno	> 70 %
<i>E. coli</i>	11775	Inhibido	< 0,01 %

Control de Esterilidad

No hubo desarrollo hasta las 48 horas de incubación